
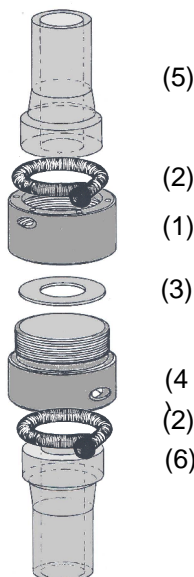


HWS-Doppelkupplung mit Einschubfeder, für DN 10 / 15 / 25

- m Einfache Montage/Demontage
- m Passend für Planflansche DN 15

DN 10	Best.-Nr. 1296 010
DN 15	Best.-Nr. 1296 015
DN 25	Best.-Nr. 1296 025

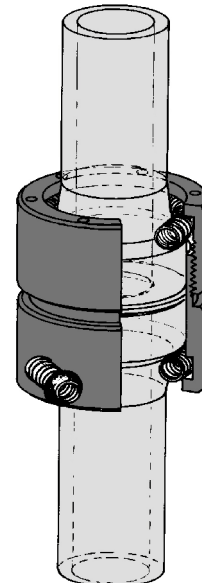

Montage

- m Dichtung* (3) in V2A-Basisteil (4) einlegen.
- m Kappe (1) leicht auf V4A-Basisteil aufschrauben und über Glasflansch (5) führen
- m V2A-Federring (2) bis zum Anschlag in die tangentielle Bohrung einschieben
- m Glasflansch (6) in Teil 4 einführen
- m den zweiten Federring (2) einschieben
- m Basisteil und Kappe fest verschrauben (ggf. mit Zapfenschlüssel*)

*bitte separat bestellen:

PTFE-Kammdichtung	Best.-Nr. 3375 015
PTFE-Dichtung mit Einlage	Best.-Nr. 3378 115
graphit. Dichtung	Best.-Nr. 3360 015
Zapfenschlüssel	Best.-Nr. 1296 115
Einschubfeder	Best.-Nr. 1290 415



1296 115



3378 115

Sicherheitshinweise:

- m Montage/Demontage nur in kaltem Zustand
- m Bitte verwenden Sie beim Nachstellen der Doppelkupplung während des Betriebes Handschuhe bzw. benutzen Sie Schraub- und Zapfenschlüssel